


Segurança em uma nova luz



SecuFix Manipulador Uterino

Sistema Pioneiro com
Colpo-transiluminação e Fixação à Vácuo

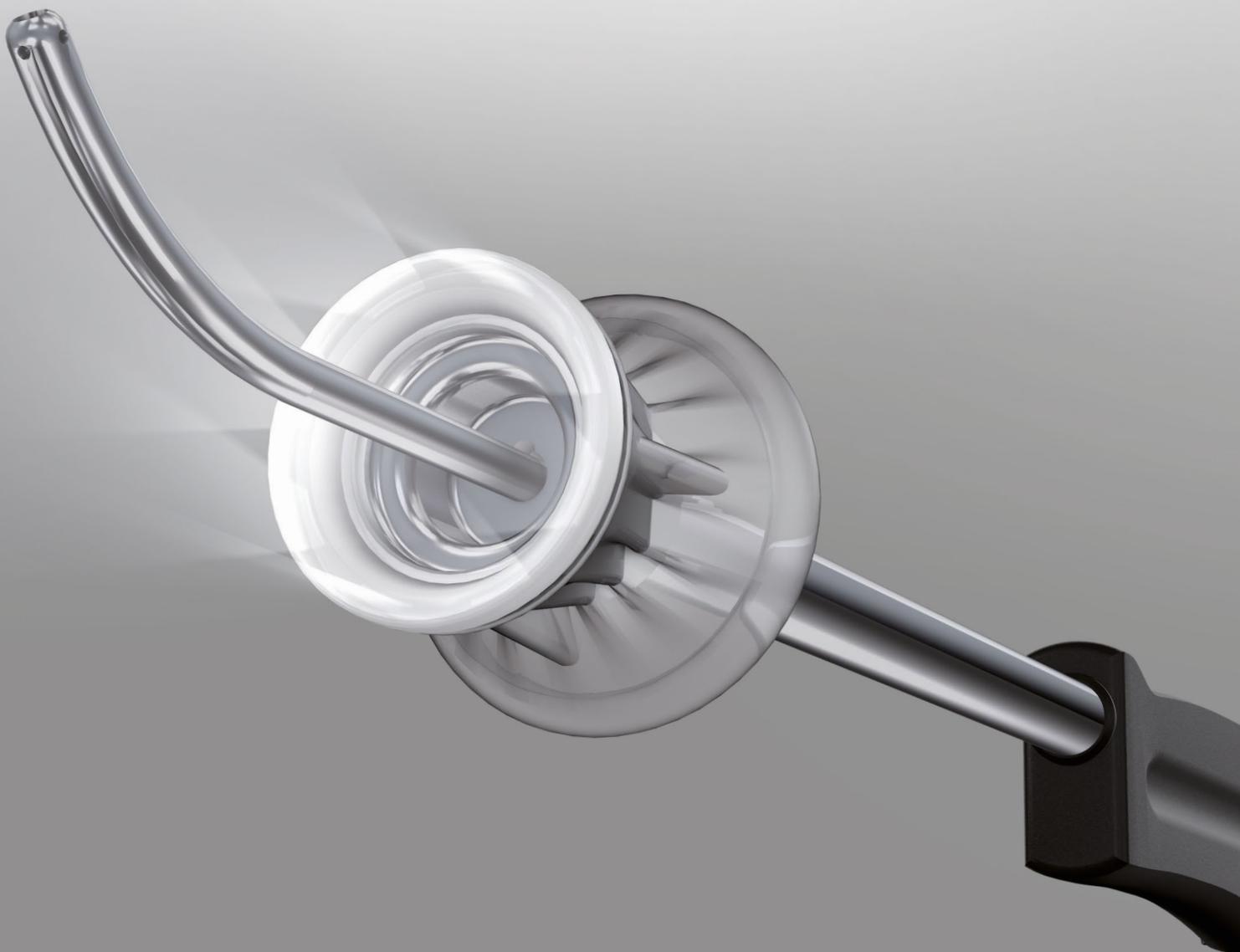

Segurança em uma nova luz

O desenvolvimento de técnicas de histerectomia minimamente invasivas e benéficas ao paciente e os bons resultados associados significam que agora a histerectomia pode, hoje, ser realizada de forma laparoscópica em muitos casos. The new SecuFix Uterus Manipulator defines new benchmarks for safety.

novos Manipulador Uterino SecuFix define novos marcos para segurança. A fixação atraumática do útero utilizando aspiração a vácuo e "Colpo-transiluminação", ou seja, a opção de visualizar o tecido utilizando iluminação anular distal para a tampa cervical são as novas características significativas do produto. Eles são fatores importantes para um resultado cirúrgico ideal e permitem conformidade com critérios oncológicos, por exemplo, o impedimento de deslocamento de células tumorais intra-peritoneais.

Todas as coisas boas vêm em três

O SecuFix possui uma estrutura modular feita de apenas três partes - uma característica positiva para manipulação e custo-benefício.


- Manipulador Uterino
- Sonda uterina com escala longitudinal
- Colpo-transiluminador


O Colpo-transiluminador é a plataforma cirúrgica ideal

- Delimitação ideal entre colo do útero e vagina
- Boa visualização do fórnix


Estabilidade significa controle

O modelo estável torna o Manipulador Uterino SecuFix um instrumento robusto que permite que o cirurgião mova o útero em qualquer direção necessária

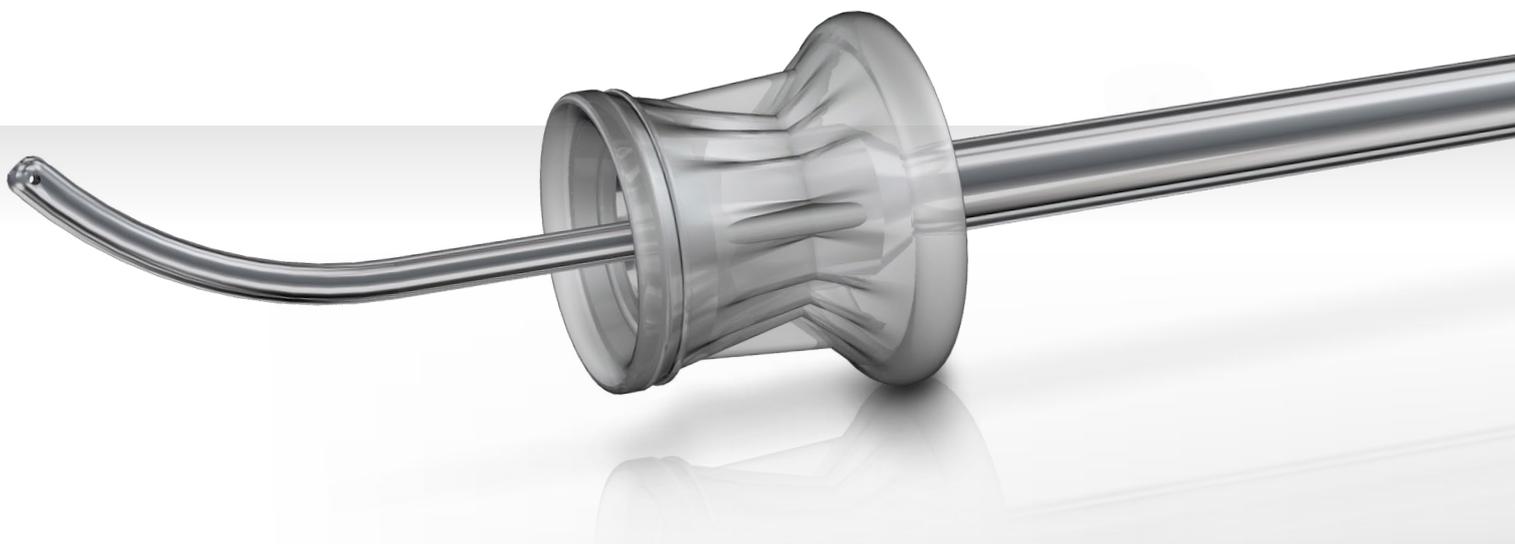

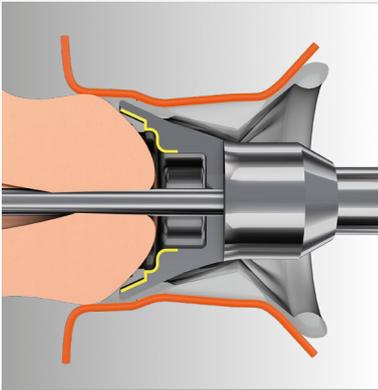

UM TAMANHO
PARA TODOS

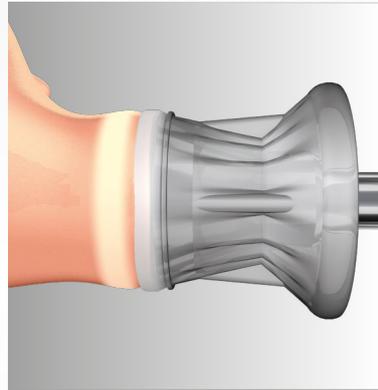

COLPO
TRANSILUMINADOR



FIXAÇÃO A
VÁCUO

A forma cônica da cúpula do manipulador e as graduações da tampa em si significam que segmentos de todos os tamanhos podem ser acomodados. O punho vaginal elástico garante uma vedação ideal para a vagina e, dessa forma, um pneumoperitônio estável durante todas as fases da intervenção.

A iluminação anelar proporciona visualização ideal da lâmina de corte e ao mesmo tempo serve como iluminação de suporte enquanto o manipulador é posicionado na vagina.

A aspiração no útero e no colo do útero permite fixação atraumática e segura. Isto evita deslocamento celular intraperitoneal.



A escala longitudinal da sonda uterina significa que a sonda pode ser adaptada a diferentes comprimentos de colo de útero com dilatação cervical mínima.



SecuFix Manipulador de Útero

Dados para Pedido



Manipulador Uterino SecuFix – Conjunto de iniciação

Manipulador Uterino SecuFix	8370701
Sonda Uterina SecuFix com escala longitudinal	8370702
Colpo-transiluminador SecuFix, estéril (embalagem com 10 conjuntos, embalados individualmente, estéril)	41708370
Escova de limpeza	7970705
Escova de limpeza	7970409
Tampa de vedação (embalagem com 10)	89.02
Colpo-transiluminador SecuFix, estéril (embalagem com 10 conjuntos, embalados individual- mente, estéril). O conjunto inclui: Colpo-transiluminador e tubo de vácuo (com válvula sem retorno, conector de sucção, adaptador em forma de Y para utilização com um instrumento de sucção na mesma unidade de sucção, braçadeira de sucção), produto de uso único	41708370

Acessórios

Cabo de fibra de luz Feixe de fibras de Ø 3,5 mm (marcação de cor laranja), comprimento 2,3 m	806635231
Sistema de Bandeja RIWO Recipiente de instrumentos, internas dimensões (C x L x A): 500 x 200 x 60 mm, esterilizável por vapor	33024
Tubo de enxágue para limpeza em máquina, comprimento 600 mm	163915

